



Oclean

Product User Manual



安全上のご注意

- 本製品は12歳以上の方が対象です。
- 初めのうちは刺激やしびれを感じることがございますが、このような感覚は、数回使用するうちに徐々になくなります。
- 本製品はOclean専用のノズルしか使用できません。他社製のアクセサリを使用すると故障の原因となります。
- 本体は直射日光や高温を避け、風通しの良い場所に保管してください。
- 本製品はデンタルケア専用です。歯みがき以外の目的には、使用しないでください。
- 本製品はパーソナルケア製品です。複数の人での共有は推奨されません。
- 充電中は、本体が多少熱くなりますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。
やけどするほどの熱さを感じた場合は、ただちに充電を中止し、お客様窓口にご相談ください。
- 充電しないときや洗浄時は、電源プラグを抜いてください。
- 分解、改造、修理はしないでください。保証の対象外となります。
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。
- 本製品は、40℃未満の水を使用してください。
- 洗浄器の本体を水に浸けしないでください。本体は必ず使用後に乾いた布で拭いてください。
- 口腔手術を受けたばかりの方や、歯茎から大量の出血があるなど、その他の口腔症状が続いている方は、ご使用前に歯医者に相談してください。
- 本製品は、繰り返し充電可能なリチウムイオン電池が内蔵されています。長時間使用しない場合は、1か月に1回は充電してください。破棄する場合は、家庭用ごみと一緒に捨ててください。本製品を破棄する場合は、お住いの自治体規制に従って頂くか、もしくは msupport@futuremodel.co.jp までお問い合わせください。
- リチウムイオン電池の交換はユーザーではできません。お客様窓口までお問い合わせください。
- AC充電器は5V/0.5A以上のものをご使用ください。

基本の使い方

ノズル

ノズルを下部にまで挿入し、本体に密着させてください。ノズルを交換する場合は、垂直に引き抜いてください。ノズルは360度回転できます。

モード切替ボタン

ボタンを短く押すごとにモードが切り替えられます。

モードお知らせランプ

レベル1 手動クリーニング
レベル2 自動クリーニング
レベル3 自動クリーニング


Ocleanアプリでカスタマイズすることができます。

アプリのインストール方法

「Oclean care」アプリを「Google Playストア」または、「App store」からダウンロードします。「Oclean care」アプリをインストールすれば、クリーニングの設定を行うことができます。



App store & Google Play

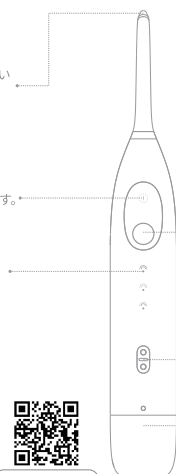

電源ボタン

ボタンを短く押すことで電源をオン/オフできます。前回使用したモードで起動します。

連続的な水流を出すには電源ボタンを押し続け、止める場合はボタンを離してください。

バッテリー残量表示ランプ

赤色で点滅: 電池残量低下の警告
白色で点滅: 充電中の状態
白色で点灯: バッテリーがフルの状態

充電ポート

専用充電ケーブルを充電ポートに取り付けた後、充電が開始されます。

水タンク

水タンクは、わずかな力で引き下げることで取り外すことができます。




トラベルケース
本体とノズルを収納して持ち運ぶことができます。




専用充電ケーブル

充電が必要な場合を本体に専用充電ケーブルをセットしてください。充電が終わりましたら、専用充電ケーブルを取り外してください。

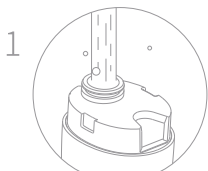


水タンクを補充する方法

水タンクを引き下げて取り外し、水タンクに水を入れます。(水の温度は40℃を超えないようにしてください)
水タンクを押し上げて本体に戻してください

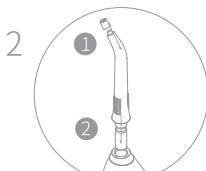

ノズルの取り付け方法

1. シリコンキャップをノズルに取り付けます。
2. ノズルをデバイス本体に取り付けます。
3. ノズルは4~6ヶ月ごとに交換することをお勧めします。ノズルが詰まったり、通常通りに装着できなかった場合は、直ちに交換してください。

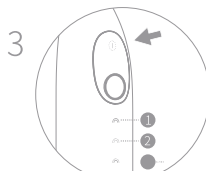


モード切り替え方法

モード切り替えボタンを押して、最適なモードを選択してください。前回使用したモードで起動します。

バッテリー残量の確認と充電方法

バッテリー残量が15%以下になると、バッテリー残量表示ランプが赤色で点滅します。充電するには、付属の専用充電ケーブルを本体に取り付けて充電してください。充電中は、バッテリー残量表示ランプが白色で点滅します。充電が完了すると、白色に点灯します。


本体の充電には約3時間かかります。充電ポートに異物や水分が残っている場合は先にクリーニングをしてから充電をしてください。充電が終わりましたら、充電ポートから付属の専用充電ケーブルを外してください。

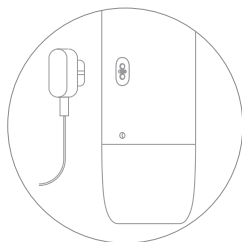

ウォーターフロッサーの使い方

ノズルを歯と歯の間に近づけ、本体の電源ボタンを押し続けてクリーニングを開始します。歯茎のラインに沿ってゆっくりと動かし、次のゾーンに移動し、すべての歯と歯の間のクリーニングを繰り返します。

ノズルと歯と歯の間を90度の角度に保つと、より良いクリーニング効果を発揮します。

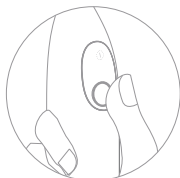


使用中に一時停止するには、電源ボタンを押します。再び電源ボタンを押すと使用を再開できます。

クリーニングと保管

ノズルを歯と歯の間に近づけ、本体の電源ボタンを押し続けてクリーニングを開始します。歯茎のラインに沿ってゆっくりと動かし、次のゾーンに移動し、すべての歯と歯の間のクリーニングを繰り返します。

ノズルと歯と歯の間を90度の角度に保つと、より良いクリーニング効果を発揮します。

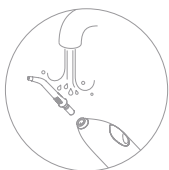

使用后、ノズルを取り外して、水でノズルをきれいにします。

水タンクを取り外して、残りの水を捨て、流水で水タンクをきれいにします。

柔らかい湿った布で本体の表面を拭いて、風通しの良い場所で保管してください。

トラベルケース 柔らかい布で汚れを拭きとることをお勧めします。

クリーニング後は、本体の表面を乾いた柔らかい布で拭いてください。

故障かな?と思ったら

症状	主な原因	解決方法
ウォーターフロッサーが動作しない	バッテリーの充電不足	ウォーターフロッサーを充電して、再度試してください。
インジケータライトが点灯しているが、製品が動作しない	ポンプが詰まっているか動かなくなっている	ノズルを真空にするか吸引して、水が出るまで試してください。

● 基本仕様

製品名:	Oclean W1 ウォーターフロッサー
ブランド名:	Oclean
型番:	Oclean W1
防水レベル:	IPX5
定格入力:	5V=0.5A
バッテリー仕様:	リチウムイオン (3.8V 1200mAh)
充電時間:	約3時間
本体重量:	約149.5g
製造業者:	Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Made in China

製品内容:	本体×1、スタンダードノズル×2、トラベルケース×1、専用充電ケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1
-------	---

日本国内正規品
輸入元: フューチャーモデル株式会社
販売元: BBソフトサービス株式会社
お問い合わせ先: プラススタイルお客様窓口
TEL: 0120-956-952(通話料無料)
E-mail: product@m.plusstyle.jp
営業時間: 10:00~19:00(特定休業日を除く)